



MAILLEFER

X-Smart IQ® kartu su Propex IQ® apekso lokatoriumi

Padidinkite savo IQ

INL/B/EN PPIQ BRC 000 / 03 / 2018 - updated 01 / 2019. Technical modifications on our products are not subject to notifications. Photos of our instruments are not contractual.

Techninė specifikacija

X-Smart IQ® motoras

Variklis ir kampinis antgalis

- **Reciprokiniai ir besisukantys judesiai**
- **Atvirkštinis sukimas esant nustatytai sukimo momento ribai (abiems judesiams)**
- **Kalibravimo funkcija (CAL) - tikslesnis sukimo momento nustatymas.**
- **Autonominė funkcija:** naudojant programą, variklį galima nustatyti veikti taip, kad jis veiktų tik su reciprokinio arba besisukančio judesio nustatymais be iPad® valdymo.
- **Bluetooth® atminties funkcija:** Jeigu prarandamas Bluetooth® ryšys, X-Smart IQ® motoras vis tiek gali veikti pagal paskutinius naudotus variklio parametrus.

Ličio jonų elementas

- Vieno įkrovimu atliekama 16 procedūrų
- Visiškas įkrovimas per 6 valandas
- Automatinis miego režimas ir automatinis maitinimo išjungimas
- Gydymo metu variklio rankinis įrenginys yra įkraunamas
- Sukimo momento diapazonas:** 0.5Ncm - 5Ncm (atsižvelgiant į maksimalų greitį)
- Greičio diapazonas:** 250 aps/min - 850 aps/min
- Kampinis antgalis autoklavuojamas 134°C**
- Universalus įkroviklis (100–240V, 50Hz /60 Hz)**

*Greitis = 300 aps/min (RPM), o sukimo momentas = 2Ncm
 **Gydymas apibrėžiamas kaip 2 kanalų gydymas su 4 instrumentais kiekviename kanale, naudojant kiekvieną 30s

Endo IQ® Programėlė

Endo IQ® Programėlė

- **Endo IQ® programėlė suderinama su dabartiniais iPad® dydžiais/modeliais, palaikančiais dvi naujausias Apple iOS® versijas**
- Instrumentų bibliotekoje arba rasite iš anksto nustatytas programas TruNatomy®, WaveOne® Gold, WaveOne®, ProTaper Next®, ProTaper Gold®, ProTaper Universal®, Profile®, Pathfile® ir ProGlider® instrumentams.
- Instrumentų biblioteką galima pritaikyti ir suderinti su kitomis formavimo sistemomis
- Galimybė nustatyti kelis vartotojus

Propex IQ® Apekso lokatorius

- **Keturi darbo režimai:** nesusungtas arba sujungtas kartu su X-Smart IQ® rankiniu endo varikliu, prijungtas arba neprijungtas prie Endo IQ® programos
- **Matmenys:** ilgis 74,6mm, plotis 45,4mm, aukštis 19,5mm
- **Svoris:** 80g

Maitinimas: įkraunamas 2x Ni-MH baterijos: Mažiausia talpa 780 mAh, nominali 2,4 VDC (voltų nuolatinės elektros srovės)
Įkroviklio maitinimo šaltinis 100 - 240 VAC (Voltų kintamos elektros srovės)
50–60Hz dažnis
Bluetooth® 4.0

Endo IQ® iPad stovas


- Palaiko visus iPad® dydžius "landscape" režimu
- 45 laipsnių palinkimo kampas
- iPad® galima lengvai pastatyti ant stovo su apsaugine rankove

Apple, iPad® ir iPad® Mini yra Apple Inc. prekės ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse. App Store yra Apple Inc. paslauga ženklas. iOS® yra Cisco prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.
 Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc., o Dentsply tokius ženklus gali naudoti tik pagal licenciją.

Maillefer Instruments Holding Sàrl
 Chemin du Verger 3 - 1338 Ballaigues - Switzerland
 Phone: +41 (0)21 843 92 92 endo@dentsplysirona.com
 dentsplysirona.com

Dentsply Sirona
 Endodontics

- TINKA VISIEMS "IPAD DYZDIAMS "LANDSCAPE" REŽIMU
- 45 LAIPSNIŲ PALINKIMO KAMPAS
- IPAD® GALIMA LENGVAI PASTATYTI ANT STOVO SU APSAUGINE RANKOVE

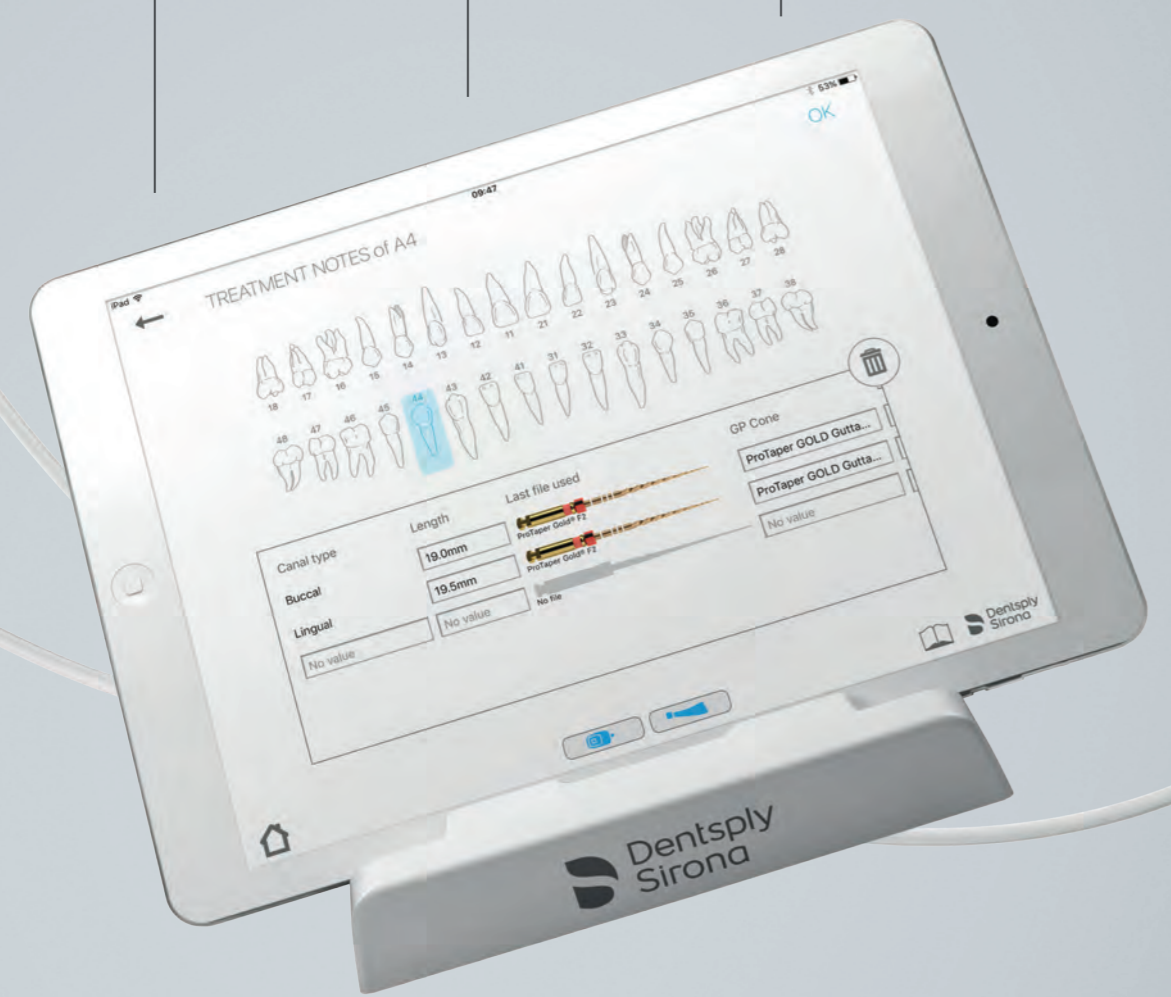

Sukurtas jūsų reikliai aplinkai



MAILLEFER

X-Smart IQ® įrenginys

Variklis, užtikrinantis visišką judėjimo laisvę.



16 GYDymo
PROCEDŪRŲ

Plonas, gerai subalansuotas ir belaidis rankinis įrenginys

Elemento darbo laikas 16 procedūrų* ir galimybė įkrauti gydymo metu



LABAI MAŽA
GALVUTĖ

Lengva prieiga ir puikus matomumas

Labai maža galvutė su 360° reguliuojamu kampiniu antgaliu




PASIRINKITE
SAVO FORMAVIMO
SISTEMĄ


Greitai pereikite iš reciprokinio į nuolatinį judesį

WaveOne® Gold
Reciprokiniai instrumentai

Naujausia reciprokinio judesio technologija, dirbti kanale užtikrintai.

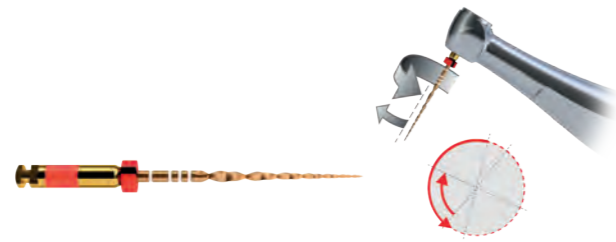

ProTaper Next®
Endodontiniai instrumentai
Naujos kartos endodontijos našumo ir universalumo standartas.

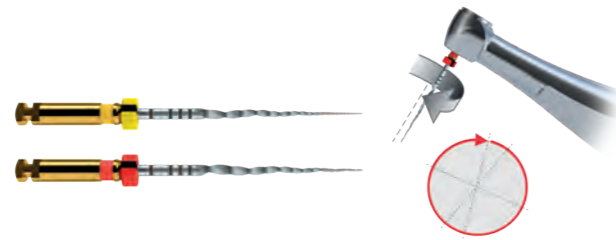

MAILLEFER



Endo IQ® programėlė

Pagrindinė jūsų IQ patirtis, integruota į Apple iOS® programėlę



SUKIMO MOMENTO
STEBĖJIMAS
REALIUOJU LAIKU

Jauskitės saugiai

Momentinis sukimo momento lygio rodmuo: vaizdinis ir garsinis.



RECIPROKINIS IR NUOLAT
BESISUKANTIS JUDESYS

Atvirkštinis sukimo momentas

Galima sukimo momento atbulinės eigos funkcija dirbant reciprokinio ar nuolatinio sukimo judesiu.



INDIVIDUALUS
VALDYMAS

Pagerinkite savo prietaisų našumą

Jei norite pakeisti norimo suformuoti atskaitos taško padėtį, naudokite tinkamą "formavimo tikslo" funkciją, kai abu įrenginiai yra sujungti ir prijungti prie programos.

Naudokite „Apical Reverse“ funkciją, kai abu įrenginiai yra sujungti ir prijungti prie Endo IQ® programėlės.



TINKAMŲ INSTRUMENTŲ
BIBLIOTEKA

Užtikrintai judėkite savo seka

Pasirinkite failų seką arba lengvai sukurkite savo failų seką



PERKELKITE Į JŪSŲ
PACIENTO KORTELE

Palengvinkite gydymo duomenų kaupimą ir perdavimą

• Susiekite pagrindinius gydymo duomenis (danties numerį, darbinį ilgį, paskutinį naudotą failą, obturaciją, užrašus) su konkrečiu pacientu
• Perkelkite gydymo ataskaitą į savo paciento bylą



UŽFIKSUOKITE
GYDymo
UZRASUS

Nustatykite teisingus lūkesčius

Paaiškinkite pacientui apie endodontinį gydymą

MAILLEFER



Propex IQ® apekso lokatorius

Apekso lokatorius, tai puikus jūsų praktikos papildymas



LENGVAS
PRIJUNGIMAS

Prisijungimas prie Endo IQ® programos

Gaukite daugiau iš savo belaidžio X-Smart IQ® rankinio įrenginio tiesiog sujungdami jį laidu su Propex IQ® apekso lokatoriumi. Tokiu būdu jūs efektyviai stebite instrumento eigą ir formuojate kanalą tuo pačiu metu, o prisijungę prie Endo IQ® programos matote vaizdinę instrumento eigą, arba taip efektyviai stebite failo eigą ir formuojate kanalą tuo pačiu metu, belaidžiu būdu prisijungę prie vizualizuojančios instrumento eigos programos Endo IQ®.



ILGAS BATERIJOS
VEIKIMO LAIKAS

Patvarumas

Be naujo baterijos įkrovimo gali veikti be perstojo iki 5,5 valandų sujungtas kartu su X-Smart IQ® rankiniu įrenginiu ir prijungtas prie Endo IQ® programos.



PAPRASTAS IR
PATIKIMAS

Patikimas ir paprastas naudoti

- Garantuoja patikimą instrumentų eigos stebėjimą tiek kombinuotu režimu, tiek naudojant atskirai.
- Veikia su įvairiais irigavimo tirpalais*, jei naudojamas skystis
- Nereikalauja jokio kalibravimo; nereikia koregavimų



ITIN
LENGVAS IR NEŠIOJAMAS

Itin lengvas

Lengvas, sveriantis tik 80 gramų, todėl ypač patogus nešiojimui. Jis yra mažesnis nei Propex Pixi®. Mažas, bet didelis dėl savo našumo.



ATNAUJINAMAS
PER PROGRAMĄ

Atsparus ateičiai

Visiškai integruotas į Endo IQ® programėlę, o jo programinę įrangą galima atnaujinti atnaujinant programėlę.

*Gydymas apibrėžiamas kaip 2 kanalų gydymas su 4 instrumentais kiekviename kanale, naudojant kiekvieną 30s